

# Neurosurgery Smart Instruments

磁場式ナビゲーション対応ツール

for Electromagnetic Navigation

非磁性体 SJシリーズ

非磁性体  
SJタイタニウム脳べら



非磁性体  
SJレトラクター



*made in Japan*

**S&Brain**

# SJ brain spatula

## SJ钛ニウム脳べら

非磁性体脳べら

TITANIUM


- 非磁性体素材 (ピュアチタン) により磁場式ナビゲーションに対応
- 先端形状は、牽引に加えて剥離操作が可能なデザイン
- ロー・プロファイル仕様による狭い術野への挿入性向上



臨床使用例

先端側面図


1.5mm

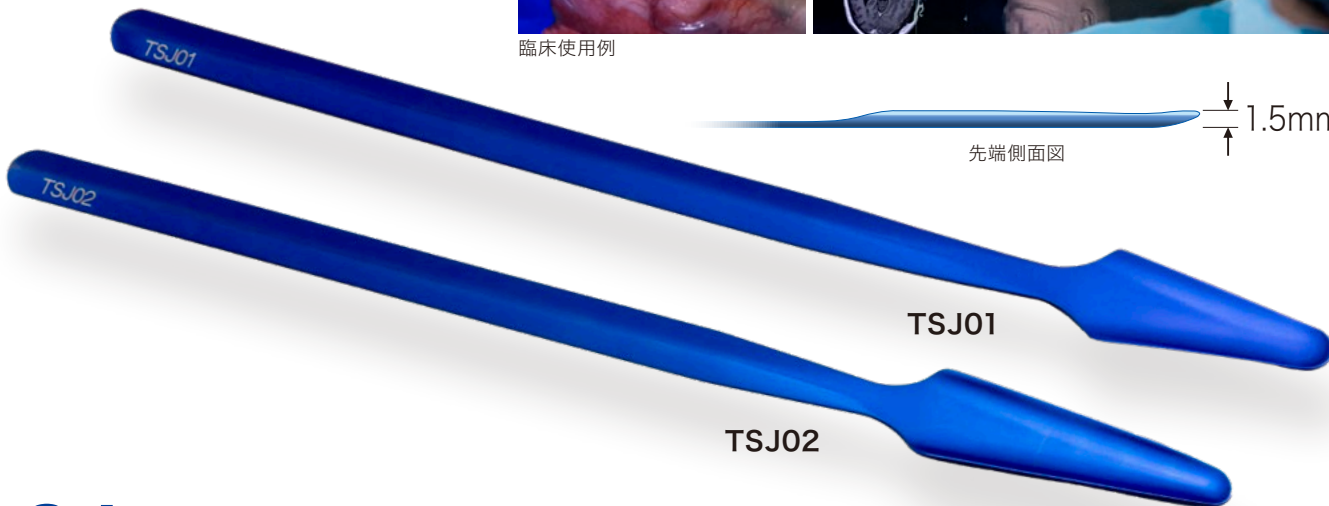

# SJ retractor

## SJレトラクター | 非磁性体開創器

- 非磁性体素材 (樹脂) により磁場式ナビゲーションに対応
- リング形状は穿頭孔 (パーフォレーター14mm径) に対応
- スモールはV-Pシャント等の脳室穿刺、ラージは内視鏡下血腫除去等を想定

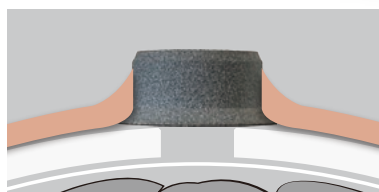

設置イメージ



臨床使用例



SJ20 (スモール)

SJ25 (ラージ)

### 製品一覧

品番	製品名	規格 (mm)	JANコード	医療機器届出番号	JMDN	一般の名称
TSJ01	SJ钛ニウム脳べらA	全長:166.5 有効長:27 先端幅:7	4580758643071	15B1X10002000044	13645000	へら
TSJ02	SJ钛ニウム脳べらB	全長:166.5 有効長:36.5 先端幅:7	4580758643514			
SJ20	SJレトラクター (内径20mm)	内径:20 外径:29 高さ:13	4580758643484	15B1X10002000047	13373001	開創器
SJ25	SJレトラクター (内径25mm)	内径:25 外径:34 高さ:13	4580758643491			

ご監修：東京慈恵会医科大学 脳神経外科 赤崎 安晴 先生

### 取扱代理店

#### 製造販売元

#### プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6  
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

#### 販売元

#### エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201  
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518