

Neurosurgery Smart Instruments

微小血管減圧術用マイクロプローブ

for Microvascular Decompression (MVD)

ベッセルピッカー



Pull & Push

Double-Faced Microprobe

made in Japan

S&Brain

ベッセルピッカー


| 微小血管減圧術用マイクロプローブ

“ Easy to Catch & Release ”


- 1本でPull & Pushの操作を実現
- 先端のブラスト加工により、血管の滑り止め効果と顕微鏡の光反射を軽減
- ハンドル（別売品）に装着することで、有効長と角度を任意に調整可能




SE-05HB
SEミラー ハンドル（別売品）

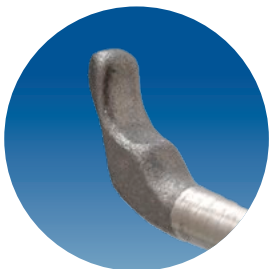


先端部のブラスト加工

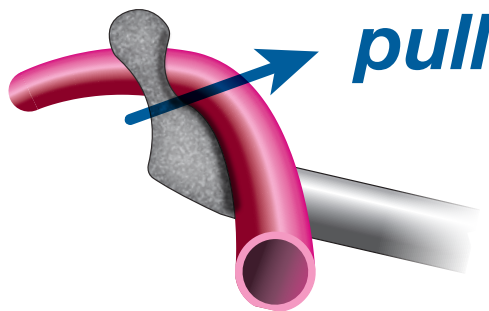

血管を確実にキャッチして安全に引き出す

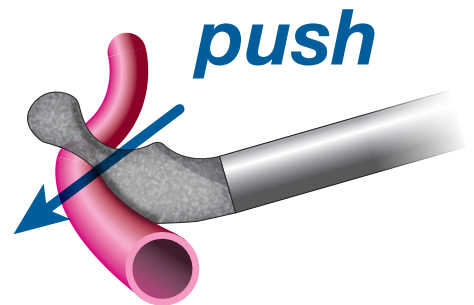

面で血管を傷つけずに押し込む

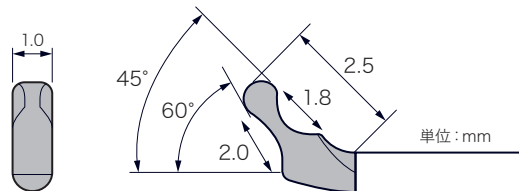


臨床使用例




Pull
SCAを手前に引き出す



Push-1
SCAを奥に押し込む

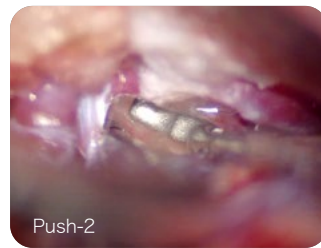

Push-2
その上からサージセルを用いて
フィブリン糊で固定する

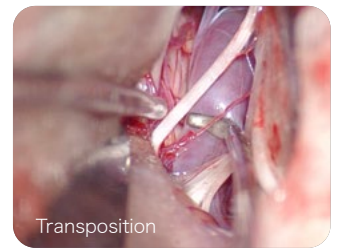

Transposition
面でVAを偏位させる

製品情報

品番	製品名	規格 (mm)	JANコード	医療機器届出番号	JMDN	一般の名称
SWANN01	ベッセルピッカー	全長120、シャフト径1.8、先端径1.0、高さ2.5	4580758643538	15B1X10002000014	70952000	剥離子

監修：東海大学医学部 脳神経外科 野中 洋一 先生

取扱代理店

製造販売元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518